

SpO₂を知ろう!

手が届くパルスオキシメータ



OXi BOY
オキシボーイ S-111



OXi YOUNG
オキシヤング S-113



OXi GIRL
オキシガール S-112

明るく見やすい親切設計

- ◆有機ELディスプレイ
- ◆ECO設計
- ◆マルチアングル機能
- ◆軽量 & 高性能

OXiシリーズ

FINGER PULSE OXIMETER

◆ ECO設計

指を入れると測定を開始し、指を抜くと自動で電源が切れるエコ設計です。

※約7秒間数値を表示した後電源が切れます。




測定イメージ

◆ マルチアングル機能

スイッチひとつで表示方向を切り替えて読みやすくするマルチアングル機能を搭載しています。


画面の明るさも調節可能で、さまざまなシーンに対応することができます。

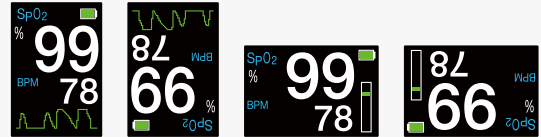

画面の明るさは5段階で調整可能です。

◆ 有機ELディスプレイ

数値が白く表示される有機ELディスプレイを採用しています。暗いところでも明るく見やすいのが特長です。

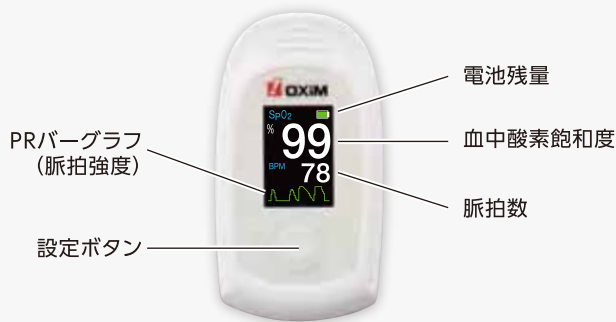

◆ 軽量&高機能

電池を入れた状態で、35gの軽量モデルです。医療現場での使用を想定した、高い測定精度と広い測定範囲を兼ね備えています。



◆ 仕様

| | |
|----------|--|
| 製品名/型番 | オキシボーイ/S-111 226ALBZX00007000 |
| 医療機器認証番号 | オキシガール/S-112 226ALBZX00007A01 オキシヤング/S-113 226ALBZX00007A02 |
| 表示方式 | 有機EL表示器 %SpO ₂ 及びP.R |
| 測定方法 | 2波長吸光度法 |
| ディスプレイ | 有機ELディスプレイ |
| 測定範囲 | %SpO ₂ 0~100% 脈拍数 30~250bpm(拍/分) |
| 測定精度 | %SpO ₂ 0~69% 70~100% ±2% 脈拍数 30~99bpm ±1bpm 100~250bpm ±1% |

◆診療報酬点数(平成21年4月1日実施)
経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき): 30点、歯科治療総合医療管理料: 140点

| | |
|---------------|--------------------------------|
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池(AAA) 1本 |
| 使用環境温度 | +5 ~ +40℃ 結露不可 |
| 保管環境温度 | -30 ~ +70℃ 結露不可 |
| 環境湿度 | 10 ~ 90%RH 使用時、保管時、結露不可 |
| 使用大気圧環境 | 700hPa~1013hPa |
| 水の侵入に対する保護の程度 | IPX2 |
| 外形寸法 | 縦67.5mm × 横38mm × 高さ25mm |
| 重量 | 約26g(電池を含まず) |
| EMC | EN60601-1-2:2007に適合 |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書含む)、添付文書、単4形アルカリ乾電池1本 |
| 保証期間 | 1年 |

◆都合により外觀・仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

製造販売元:



シースター株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1丁目8番40号 品川プレイス4F
Tel: 03-6711-5511 Fax: 03-6711-5510
www.seastar.co.jp